



rubitec ag


VARUMILL Produktzerkleinerung für die chemisch-pharmazeutische Industrie. Keine Lösung von der „Stange“, sondern individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten.

VARUMILL verbindet in optimaler Weise die bewährte konische und zylindrische Anordnung von Mahlsieben und Rotoren mit den technischen Vorteilen des rubitec-Systems:

- CIP-fähig auch bei eingebautem Sieb
- GMP-konforme Bauweise
- GMP-konforme Energiezuführung auch Technikraum
- Gekapselter und gekühlter Antrieb bei Verwendung in Reinräumen
- Frei wählbare Ein- und Austrittsstutzen
- Keine Schrauben im Produktraum
- Einsatz im  -Bereich




**VMG100
VMG125**

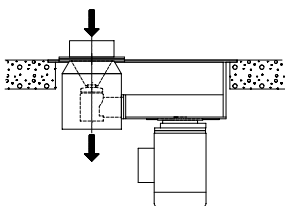


- Einbau in
Deckendurchbruch

Kundenspezifische Integration in eine Produktionslinie

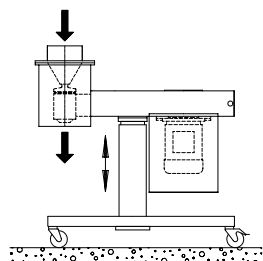

- **Fahrbar** mit
Höhenverstellung

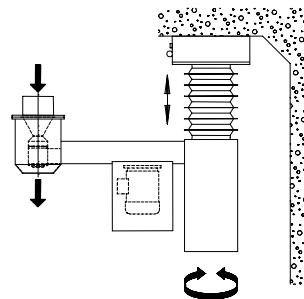

- **Schwenkbar** zwischen
mehreren Linien
- **Stapelbar**
zwischen Produktcontainer
- **Kombinierbar** mit
 - Rubitec-Hub-/Kippgeräte
 - Rubitec-Explosionsentkopplung




VMG200

3 Systeme – 1 Gerät!

Sieb u. Rotor konisch

- Mahlspaceverstellung durch vertikale Verschiebung des Rotors

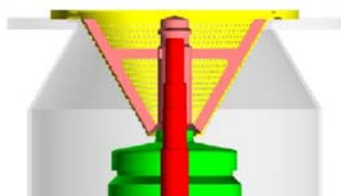


Sieb u. Rotor zylindrisch

- Mahlspace fest
- Höherer Durchsatz
- Bessere Förderung
- Kürzere Verweilzeit
- Weniger Erwärmung



Sieb u Rotor zylindrisch

- Mahlspace einstellbar
- Plus alle Vorteile der zyl. Ausführung

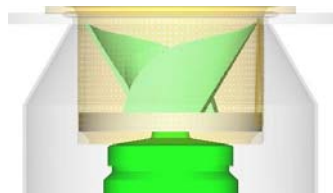

Diese 3 Systeme, welche Ihre Möglichkeiten stark erweitern und Ihre Produktivität massiv erhöhen können, sind alle in Ihrer vorhandenen VaruMill einsetzbar!

- ▮ Siebe und Rotoren für unterschiedliche Produkte: trocken oder feucht
- ▮ Sieb- und Rotorwechsel ohne Werkzeuge
- ▮ Gasgespülte Wellendichtung

- ▮ Optional mit CIP-Düse
- ▮ Niedrige Bauhöhe des Mahlgehäuses

- ▮ Einsatz von konischen und zylindrischen Sieben mit entsprechenden Rotoren
- ▮ **NEU!** Stufenlose Mahlspaceverstellung mit zylindrischem Sieb

rubitec ag

Engineering im Anlagen- und Maschinenbau

Explosionsentkopplung

Feststoffzerkleinerung

Hub-/ Kippgeräte

rubitec ag

Unsere Engineeringabteilung unterstützt Sie gerne bei der Einbindung von **VARUMILL**-Geräten in die Gesamtanlagenplanung.



Und:
Für den Fall der Fälle oder für regelmässige Wartungen steht unsere Serviceorganisation mit Original-rubitec-Ersatzteilen auf Abruf bereit.

CH-4431 Bennwil, Hauptstrasse 8
Fon +41 -(0)61-956 91 91
Fax +41 -(0)61-956 91 90
info@rubitec.ch
www.rubitec.ch

rubitec ag
chemical-pharmaceutical-equipment